



Δημήτρης Γ. Χατζηχρήστου
Καθηγητής Ουρολογίας Ανδρολογίας
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

www.hatzichristou.gr

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΩΝ ΣΤΥΣΕΩΝ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ RIGISCAN PLUS

Πρόκειται για εξέταση που βοηθά να διαγνωσθεί εάν το αίτιο της στυτικής δυσλειτουργίας είναι ψυχογενές ή οργανικό. Για την εξέταση θα λάβετε την ειδική συσκευή (holder) σε ειδική τσάντα, που περιέχει τόσο τη συσκευή Rigiscan Plus, όσο και μία ειδική θήκη/ζώνη για την τοποθέτηση της συσκευής στο μηρό σας.

Είναι απαραίτητο να κάνετε τουλάχιστον 2 συνεχόμενες νύκτες καταγραφή (συνήθως γίνεται καταγραφή για 3 νύκτες). Μετά την ολοκλήρωση των καταγραφών, θα πρέπει να επιστρέψετε την τσάντα με τη συσκευή στο ιατρείο. Η συσκευή θα συνδεθεί με ηλεκτρονικό υπολογιστή και θα αποθηκεύσει τα δεδομένα σας. Κατόπιν τα δεδομένα αναλύονται με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού (software) και εκτυπώνονται τα αναλυτικά αποτελέσματα της εξέτασης.




ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Δέστε σταθερά τη ζώνη/θήκη στον ένα μηρό σας.
- Τοποθετήστε τη συσκευή πλήρως εντός της θήκης.
- Τοποθετήστε πρώτα την αγκύλη που γράφει «base» στη βάση του πέους σας, και μετά την αγκύλη που γράφει «tip» στη κορυφή του πέους σας.
- Πατήστε το κουμπί «ON/OFF».

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΠΙΣΗΣ στα ακόλουθα:

- Εάν ξυπνήσετε τη νύκτα και θέλετε να ουρήσετε, απλά πατήστε το κουμπί «ON/OFF», ουρήστε και μετά πάλι επανενεργοποιήστε το.
- Κάθε βράδυ πριν την τοποθέτηση της συσκευής ΠΡΕΠΕΙ να αλλάξουν οι μπαταρίες. Χρησιμοποιείτε μόνο αλκαλικές μπαταρίες.
- Αποφύγετε να βρέξετε τη συσκευή.
- Προστατεύετε τη συσκευή μέσα στη θήκη της.

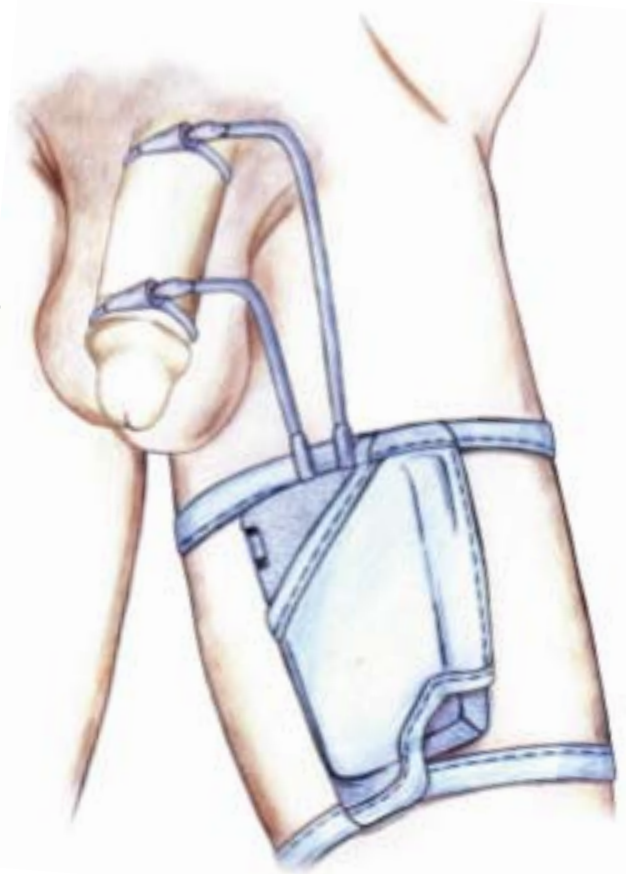

Μητροπόλεως 77, 54622 Θεσσαλονίκη
τηλέφωνο 2310273177 φαξ 2310273254